

pGreen II-62-SK

载体基本信息

出品公司：

载体名称：pGreen II-62-SK

质粒类型：植物表达载体

复制子：pSa

启动子：35S

载体大小：3347bp

5' 测序引物及序列：


3' 测序引物及序列：

载体抗性：Kan

筛选标记：嘌呤霉素（Puromycin）

克隆菌株：DH5a 等

载体质粒图谱和多克隆位点信息

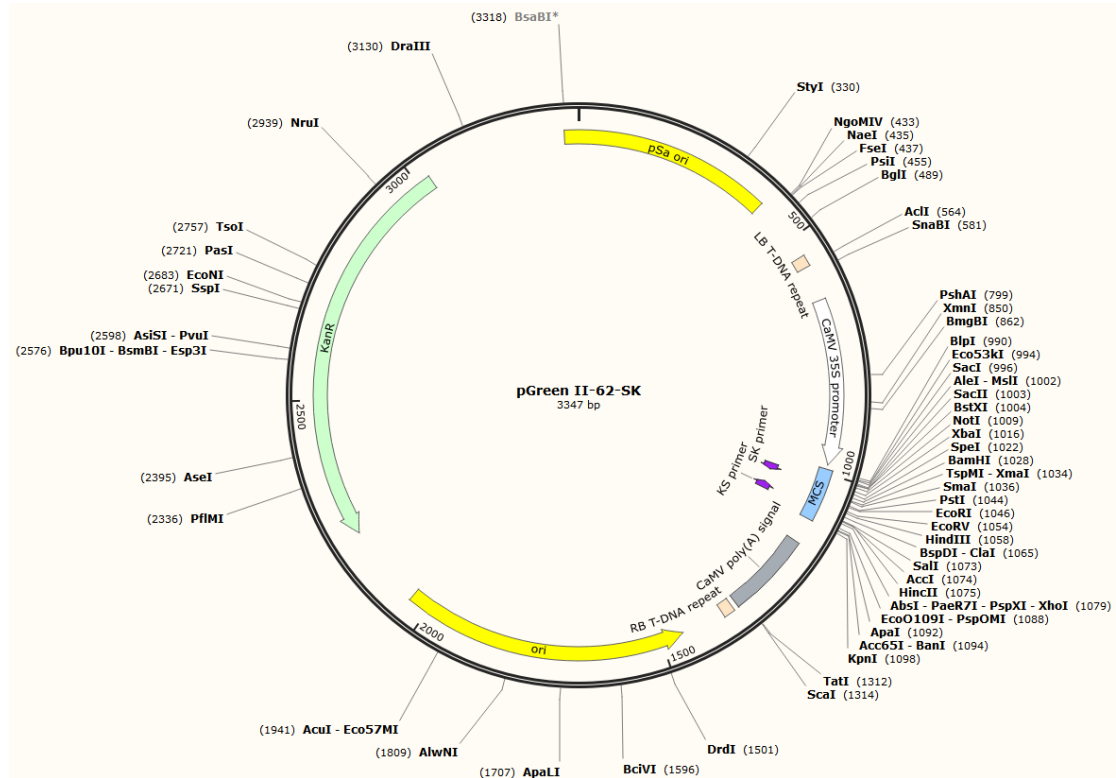

使用说明：

1. 建议收到质粒后请先转化感受态（克隆菌株），再挑选单菌落重新提取后使用。
2. 转化前请准确查找该质粒对应的抗生素、抗生素浓度、感受态（克隆菌株）和培养温度。
3. 如有必要请测序后使用。

载体序列：

ttttatccccggaagcctgtggatagaggtagttatccacgtgaaaccgctaataccccgcaaagccttgattcacggggctttccggccc
gctcaaaaactatccacgtgaaatcgctaatacagggtacgtgaaatcgctaatacggagtagtgaatcgctaataaggtcacgtgaaatc
gctaatacaaaaaggcacgtgagaacgctaataagcccttcagatcaacagcttgcaaacaccctcgctccggcaagtagttacagcaagt
agtagttcaattagctttcaattatgaatatataatcaattattggcgccttggttggacaatgcgctacgcgcaccggctccgccc
tggacaaccgcaagcgggtgccaccgtcgagcgcagccttgcccacaaccggcgccggccgaacagatcgtttataaattttt
ttttgaaaagaaaagccgaaaggcggaacctctcgggcttctggattccgatccccggaattagatcttggcaggatatattgtg
gtgtaacgttatcagcttgtagtaccctactcaaaaatgtaagatacagctcagaagaccaaagggctattgagactttcaac
aaagggtaatcgggaaacctctcggattccattgccagctatctgtcactcatcgaaaggacagtagaaaaggaaggtggctctac
aatgccatcattcgataaaggaaaggctatcattcaagatgcctctgcgacagtggtccaaagatggacccccaccagaggagca
tcgtgaaaaaagaagacgttcaaccacgtctcaagcaagtggtgatgtgacatctcactgacgtaagggatgacgcaaatccac
tatcttcgcaagacctctctatataaggaagtatttattggagaggacagcccaagctgagctccaccgggtggcgccgctcta
gaaactagtgatccccgggctgcaggaattcgatatcaagcttatcgataccgtcgacctgagggggggcccggtaccaattcggtagc
tgaatcaccagctctctctacaatctatctctctattttctcataaataatgtgtgagtagttcccgataagggaaattagggttctat
agggtttcgctatgtttgagcatataagaaaccttagtatgtattgtattgtaaaatacttctatcaataaaatttcaattcctaaaacc
aaaatccagtaactaaatccagatccactagccttgacaggatatattggcgggtaactaagtcgctgtatgtttgtttgagatctcatgt
gagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgctgtgctggcgttttccataggtccgccccctgacgagcatcaca
aaaatcgacgtcaagtcagaggtggcgaaccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctcctcgtcgctctct
gttccgacctgcccgttaccggataacctgtcgcctttctccctcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcg
gtgtaggtcgtcgtccaagctgggctgtgtgcacgaacccccgttcagccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagcca
accggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtagcggtgctacagattctgt
aagtggtggcctaactacggctacactagaagaacagtatttggtatctgcgctctgtaagccagttacctcggaagaaggttgtagc
tcttgatccggcaaacaccaccgctggtagcgggtgtttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaggatctcaagaaga
tctttgatcttttctacggggtgctgacgtcagtggaacgaaactcacgttaagggattttggtcatgagattcaaaaaggatcttacct
agatcttttaataaaatgaagtttaataatcaatcaaaagtataatgtgtaacattggctagtgattagaaaaactcatcgagcatcaa
atgaaactgcaattattcatatcaggattatcaataccatattttgaaaagccgtttctgtaatgaaggagaaaactcaccgaggcagttc
cataggtaggcaagatcctggatcgtgctcgattccgactcgtccaacatcaataaacctattaattccccctgtaaaaaataaggttat
caagtgagaatcaccatgagtgacgactgaatccggtgagaatggcaaaagttatgcatttcttcagactgttcaacaggccagccat
tacgctcgtcatcaaaatcactcgatcaaccaaaccttattcattcgtgattgcgcctgagcgagacgaaatacgcgatcgtgttaaaag
gacaattacaacaggaatcgaatgcaaccggcgcaggaactgccagcgcatacaatattttcacctgaaatcaggatattcttcta
acctggaatgctgtttccctgggatcagtggtgagtaacatgcatcatcaggagtagcggataaaatgcttgatggcggaagaggcat
aaattccgtcagccagtttagtctgacctctcatctgtaacaacattggcaacgtacctttgcatgttcagaacaactctggcgcacg
ggcttccatacaatcggtagattgtcgacctgattgcccacattatcgagcccattataccatataaatcagatccatgttgaatt
taatcggccttgagcaagacgtttccgttgaatatggctcataacacccttgattactgtttatgtaagcagacagtttattgttcatga
tgatatattttatctgtgcaatgtaacatcagagattttgagacacaacgtggctttgtgaataaatcgaacttttctgagttgaaggatca
gatcacgcatctccgacaacgcagaccgttccgtggcaagcaaaagttcaaaatcaccaactggccacctacaacaagctctcatca
accgtggctcctcactttctggctggatgatggggcgattcaggcgatccccatccaacagcccgcgtcgagcgggct